

产品手册

H_HER2 MCF-7 Cell Line

H_HER2 MCF-7 细胞系

For research use only!

本品仅供科研使用，严禁用于治疗！

版本号：V2.12.2

目录

一、	产品基本信息及组分	3
二、	包装、运输及储存	3
三、	材料准备	3
1.	细胞培养、冻存、复苏试剂准备	3
2.	试剂耗材准备	3
四、	细胞复苏、传代、冻存	4
1.	细胞复苏（血清为 20%）	4
2.	细胞传代（以 10 cm 皿为例）	4
3.	细胞冻存	4
五、	验证结果	5
1.	流式检测蛋白表达	5
附录 1	成瘤数据	6
附录 2	H_HER2 -3×Flag 氨基酸序列（P04626-1）	7
使用许可协议：		7

一、产品基本信息及组分

基本信息

产品编号	产品名称	规格
GM-C26434	H ₂ HER2 MCF-7 Cell Line	5E6 Cells/mL

产品组成

产品编号	产品名称	规格	数量	储存
GM-C26434	H ₂ HER2 MCF-7 Cell Line	5E6 Cells/mL	1 管	-196°C

二、包装、运输及储存

1. 细胞系产品干冰运输，-196°C 以下（冰箱或液氮的气相）长期储存。
2. 接触产品请带手套。请收到产品立即确认产品是否为冻存状态，-196°C 以下（冰箱或液氮的气相）长期储存。
3. 本产品相关实验，应在二级生物安全实验室或生物安全柜中进行。

三、材料准备

1. 细胞培养、冻存、复苏试剂准备

细胞复苏培养基:	MEM(Gibco)+20% FBS+1% P.S+0.01 mg/mL Bovine Insulin
细胞生长培养基:	MEM(Gibco)+10% FBS+1% P.S+0.01 mg/mL Bovine Insulin+0.75 µg/mL Puromycin
细胞冻存液:	90% FBS+10% DMSO

注意：细胞应使用 Gibco/11095080 MEM 培养基或购买吉满生物完全培养基培养，血清需使用说明书相同血清或 gibco 血清。

2. 试剂耗材准备

试剂准备

Reagent	Specification	Manufacturer/Catalogue No.
Puromycin	25 mg	Genomeditech/GM-040401-1
Bovine Insulin	/	Yeasen/40107ES25
Fetal Bovine Serum	500 mL	ExCell/FSP500
MEM	500 mL	Gibco/ 11095080
Anti-H ₂ HER2 hIgG1 Antibody(Margetuximab)	/	Genomeditech/GM-49468AB

重要仪器

Equipment	Manufacturer/Catalogue No.
细胞计数仪	ThermoFisher Scientific/Countess 3
流式细胞仪	贝克曼库尔特国际贸易（上海）有限公司/CytoFLEX

四、 细胞复苏、传代、冻存

1. 细胞复苏（血清为 20%）

- 37°C 水浴锅预热复苏培养基，加入预热后的复苏培养基 5 mL 至 15 mL 离心管。
- 从液氮中取出冻存细胞并迅速放入 37°C 恒温水浴锅，将细胞液面浸至水面以下轻轻摇动解冻，直到刚刚融化（通常 2-3 分钟）。
- 用 70% 乙醇擦拭冻存管外部以降低污染的几率。在生物安全柜或超净台中将冻存管中的细胞悬液转移到步骤 a) 的离心管中，轻轻混匀， $176 \times g$ ，离心 5 min，使细胞沉淀，弃上清。
- 使用 1 mL 复苏培养基重悬，可取出部分使用台盼蓝染色计数活细胞，活细胞 $\geq 3 \times 10^6$ cells/mL。
- 通过补加复苏培养基的形式，调整活细胞密度到 $4-5 \times 10^5$ cells/mL，根据细胞悬液总体积，将细胞接种到合适的培养皿中。

3. 细胞冻存

- 使用 $176 \times g$ ，3 min 离心收集细胞。
- 使用预冷细胞冻存液（90% FBS + 10% DMSO）重悬细胞，细胞密度调整为 5×10^6 cells/mL，每管 1 mL 分装到细胞冻存管中。
- 拧紧盖子，适当标记后，将冻存管置于梯度降温盒中，-80°C 下保存至少 1 天，尽快转移至液氮中。

2. 细胞传代（以 10 cm 皿为例）

注：细胞复苏后的 1 至 3 代，使用复苏培养基，待细胞状态稳定后，更换为含有抗生素的生长培养基。

- 细胞为上皮细胞，贴壁生长。培养箱中孵育 48-72 h 后，镜下观察细胞贴壁情况，当细胞密度大于 90%，即可进行细胞传代。推荐细胞传代比例为 1:2-1:3，3-5 天传代。
- 将皿或培养瓶中的培养液弃去，10 cm 皿加 2 mL PBS 润洗 1 次。
- 弃 PBS，加 1 mL 0.25% Trypsin-EDTA 消化液，37°C 消化 1-2 min，显微镜下观察。
- 待细胞变圆，细胞间隙明显，部分细胞刚开始脱离瓶壁时，加 1 mL 左右生长培养基混匀终止消化，将细胞小心吹打下来， $176 \times g$ 室温离心 3 min。
- 弃上清，细胞沉淀用生长培养基重悬，根据传代前细胞密度分盘（根据培养皿面积和细胞密度计算，传代后细胞密度为 30-35%）。

注意事项：

- 细胞复苏后前几代，贴壁慢，属于正常现象。复苏后 2-3 天才可观察到明显的贴壁。细胞有密度依赖，低密度生长很慢。状态恢复后，生长速度趋于稳定。
- 由于初次复苏可能传代间隔时间较长，若隔 2-3 天不处理，需适当补加新鲜培养基或直接更换新鲜培养基。
- 细胞培养时，会有一些漂浮细胞，悬浮的活细胞可以通过离心后重新加入到培养瓶中培养（传代时具体观察，若占比小，可直接丢弃）。

五、 验证结果

1. 流式检测蛋白表达

操作步骤可调整优化，对于本实验，推荐H₂HER2 MCF-7 Cell Line细胞量为 2×10^5 cells/管。操作步骤如下：

- 实验前，需等待细胞生长速率稳定，约需要3-5 d。
- 实验当天，消化H₂HER2 MCF-7 cell line，取100 μ L细胞悬液（细胞计数后用PBS调整浓度为 2×10^6 cells/mL），加入适量的表面抗体（Anti-H₂HER2 hIgG1 Antibody(Margetuximab)），4℃避光孵育1 h。
- 加入1-2 mL PBS冲洗，重复此步骤。
- 加入荧光标记的二抗，4℃避光孵育30 min。
- 1000 rpm离心5 min，去除上清，用300 μ L PBS重悬。
- 立即上机检测。
- 验证结果。

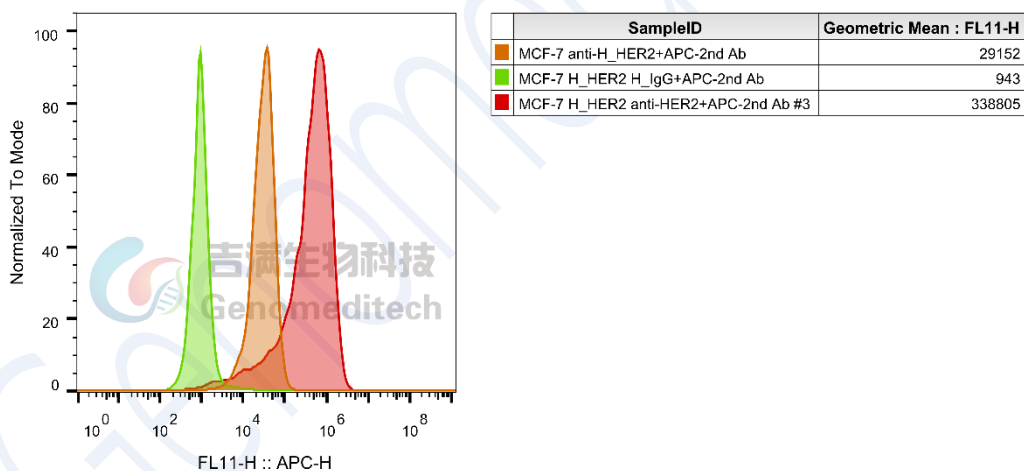


Fig1. 流式验证结果

附录 1 成瘤数据

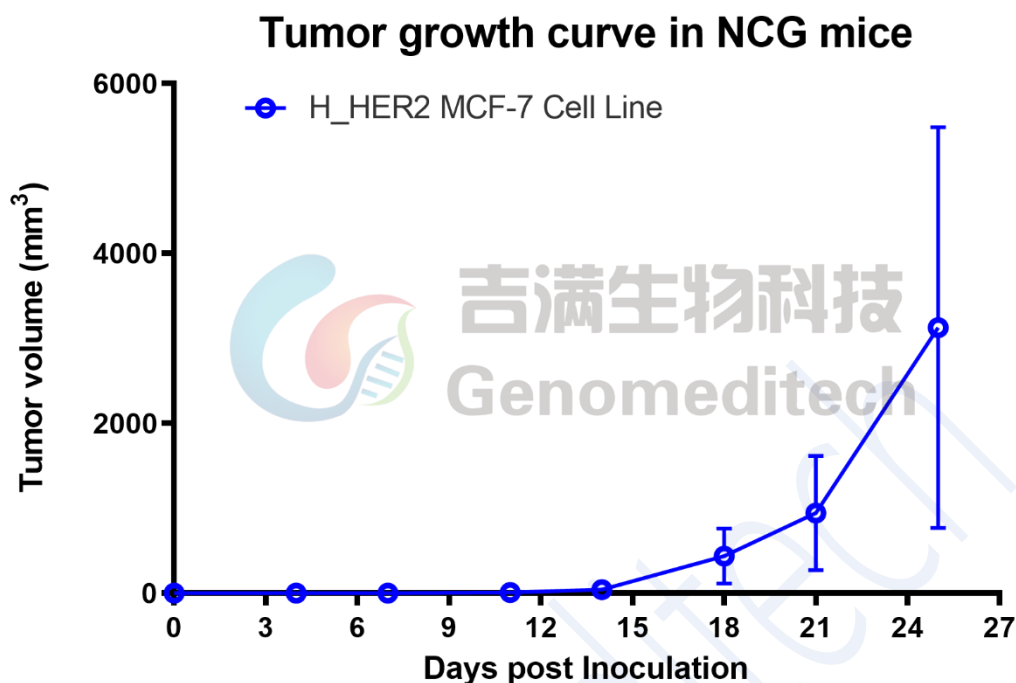


Fig2. 在 NCG 小鼠 H_HER2 MCF-7 细胞的肿瘤生长曲线。将 H_HER2 MCF-7 Cell Line (3×10^6 个细胞/只) 皮下接种于 NCG 小鼠 (雌性, 6-8 周龄, $n=3$)。每周测量两次肿瘤体积, 数据以平均值 $\pm$ SEM 表示。

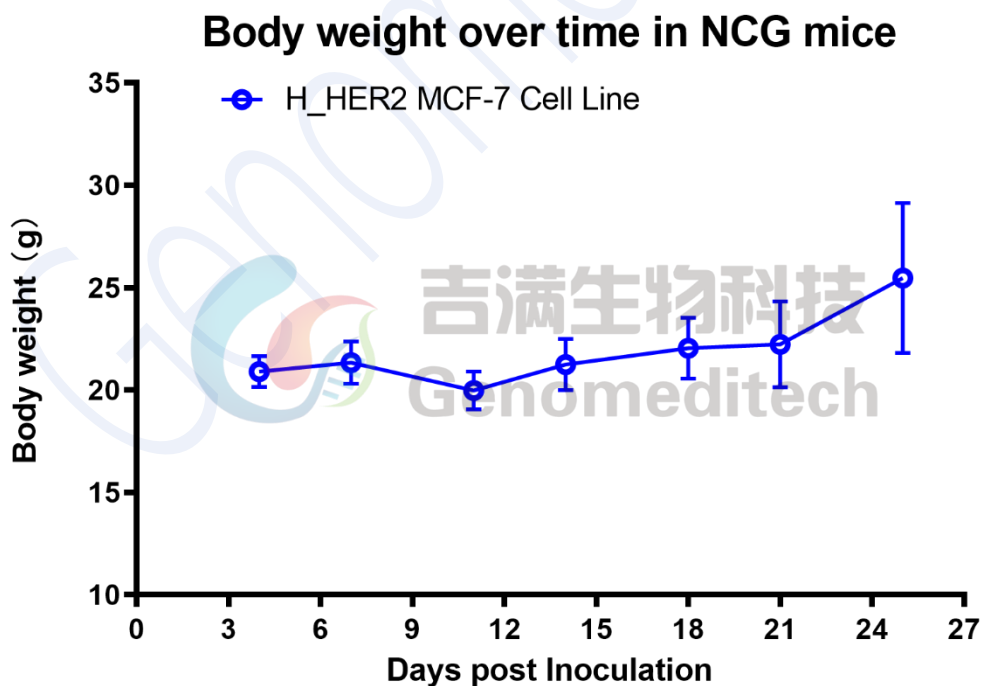


Fig3. 在 NCG 小鼠中 H_HER2 MCF-7 细胞移植后的体重变化。相同实验条件下, 每周测量两次体重, 数据以平均值 $\pm$ SEM 表示

附录2 H₂HER2 -3×Flag 氨基酸序列 (P04626-1)

MELAAALCRWGLLLALLPPGAASTQVCTGTDMKLRLPASPETHLDMLRHL YQGCQVVQG
NLELTYLPTNASLSFLQDIQEVQGYVLIHQNVRQVPLQRLRIVRG TQLFEDNYALAVLD
NGDPLNNTTPVTGASPGGLRELQLRSLTEILKGGVLIQRNPQLCYQDTILWKDIFHKNNQL
ALTIDTNRSRACHPCSPMCKGSRGWGESSEDCQSLTRTV CAGGCARCKGPLPTDCCHEQ
CAAGCTGPKHSDCLACLHFNHSGICELHCPALVTYNTDTFESMPNPEG RYTFGASCVTAC
PYNYLSTDVG SCTLVCPLHNQEVT AEDGTQRCEKCSKPCARVCYGLGMEHLREVRVTS
ANIQEFAGCKKIFGSLAFLPESFDGDPASNTAPLQPEQLQVFETLEEITGYLYISAWPDSL P
DLSVFQNLQVIRGRILHNGAYS LTLQGLGISWLGLRSLRELGSG LALIHNTHLCFVHTVP
WDQLFRNPHQALLHTANRPEDECVGEGLACHQLCARGHCWGPGPTQCVNCSQFLRGQE
CVEECRVLQGLPREYVNARHCLPCHPECQPQNGSVTCFGPEADQCVACAHYKDPPFCVA
RCPSGVKPDLSYMPIWKFPDEEGACQPCPINCTHSCVDLDDKGCPAEQRASPLTSIISAVV
GILLVVVLGVVFGILIKRRQQKIRKYTMRLLQETELVEPLTPSGAMPNQAQMRILKETEL
RKVKVLGSGAFGT VYKGIWIPDGENVKIPVAIKV LRENTSPKANKEILDEAYVMAGV GSP
YVSRLLGICLTSTVQLVTQLMPY GCLLDHVREN RGLGSQDLLNWC MQIAKGMSYLEDV
RLVHRDLAARNVLVKSPNHVKITDFGLARLLDIDETEYHADGGKVPIKWMAL ESILRRRF
THQSDVWSYGVTVWELMTFGAKPYDGIPAREIPDLLEKGERLPQPPICTIDVYMIMVKCW
MIDSECRPRFREL VSEFSRMARDPQRFVVIQNE DLGPASPLDSTFYRSLLEDDDMGDLVD
AEEYLVPQQGFPCDPAPGAGGMVHHRHRSSTRSGGGDLTLGLEPSEEEAPRSPLAPSEG
AGSDVFDGDLGMGA AKGLQSLPTHDP SPLQRYSEDPTVPLPSETDG YVAPLTCSPQPEYV
NQPDVRPQPPSPREGPLPAARPAGATLERPKTLSPGKNGVVKDVFAFGGAVENPEYLTPQ
GGAAPQPHPPAFSPAFDNLYYWDQDPPERGAPPSTFKGTPTAENPEYLG LDVPVLESRT
RPGPSGSMDYKDHDGDYKDHDIDYKDDDDK

使用许可协议:

凡购买及使用本细胞系产品，即表明使用者自愿接受并遵守以下相关使用政策:

- 本细胞系产品限于科研用途，不得被利用于任何商业用途。
- 本产品严禁用于人类或动物疾病诊治，也不得直接用于人体相关实验。

- 用户及为其利益服务的第三方承包商仅可在约定科研范围内使用本材料及其子代，不得进行修饰，亦不得向任何其他实体（包括关联机构）分发、销售、转让或以其他方式提供吉满生物材料。
- 如需将本产品用于本声明范围以外的用途，须事先获得吉满生物科技（上海）有限公司的书面许可，详情请联系吉满生物科技（上海）有限公司。

Genomeditech