

产品手册

Luciferase Raji (CD20 KO) Cell Line

Luciferase Raji (CD20 KO) 细胞系

For research use only!

本品仅供科研使用，严禁用于治疗！

版本号：V2.12.1

目录

一、	产品基本信息及组分	3
二、	包装、运输及储存	3
三、	材料准备	3
1.	细胞培养、冻存、复苏试剂准备	3
2.	试剂耗材准备	3
四、	细胞复苏、传代、冻存	4
1.	细胞复苏	4
2.	细胞传代（以 10 cm 皿为例）	4
3.	细胞冻存	4
五、	验证结果（示例）	5
1.	流式检测蛋白表达	5
2.	Luciferase 检测实验	6
1)	报告基因检测	6
2)	验证结果	6
附录 1	Sanger 测序结果	7
相关产品：		8
使用许可协议：		9

一、产品基本信息及组分

基本信息

产品编号	产品名称	规格
GM-C40275	Luciferase Raji (CD20 KO) Cell Line	5E6 Cells/mL

组成成分

产品编号	产品名称	规格	数量	储存
GM-C40275	Luciferase Raji (CD20 KO) Cell Line	5E6 Cells/mL	1 管	-196°C

二、包装、运输及储存

- 细胞系产品干冰运输，-196°C 以下（冰箱或液氮的气相）长期储存。
- 接触产品请带手套。请收到产品立即确认产品是否为冻存状态，-196°C 以下（冰箱或液氮的气相）长期储存。
- 本产品相关实验，应在二级生物安全实验室或生物安全柜中进行。

三、材料准备

1. 细胞培养、冻存、复苏试剂准备

细胞复苏培养基:	RPMI 1640+10% FBS+1% P.S
细胞生长培养基:	RPMI 1640+10% FBS+1% P.S+3 µg/mL Blasticidin+0.5 µg/mL Puromycin
细胞冻存液:	90% FBS+10% DMSO

2. 试剂耗材准备

试剂准备

Reagent	Specification	Manufacturer/Catalogue No.
RPMI 1640	500 mL	Gibco/C11875500BT
Fetal Bovine Serum	500 mL	ExCell/FSP500
Pen/Strep	100 mL	Thermo/15140-122
Blasticidin	10 mg	Genomeditech/GM-040404-1
Puromycin	25 mg	Genomeditech/GM-040401-1
Anti-CD20 mIgG2a Antibody (ocrelizumab)	/	Genomeditech/GM-88845AB
GMOne-Step 2.0 Luciferase Reporter Gene Assay Kit	/	Genomeditech/GM-040513C

重要仪器

Equipment	Manufacturer/Catalogue No.
细胞计数仪	ThermoFisher Scientific/Countess 3
流式细胞仪	安捷伦科技（中国）有限公司/2060R

四、 细胞复苏、传代、冻存

1. 细胞复苏

- 37°C水浴锅预热复苏培养基，加入预热后的复苏培养基 5 mL 至 15 mL 离心管。
- 从液氮中取出冻存细胞并迅速放入 37°C恒温水浴锅，将细胞液面浸至水面以下轻轻摇动解冻，直到刚刚融化（通常 2-3 分钟）。
- 用 70%乙醇擦拭冻存管外部以降低污染的几率。在生物安全柜或超净台中将冻存管中的细胞悬液转移到步骤 a) 的离心管中，轻轻混匀， $176 \times g$ ，离心 3 min，使细胞沉淀，弃上清。
- 使用 1 mL 复苏培养基重悬，可取出部分使用台盼蓝染色计数活细胞，活细胞 $\geq 3 \times 10^6$ cells/mL。
- 通过补加复苏培养基的形式，调整活细胞密度到 $2.5-4 \times 10^5$ cells/mL，根据细胞悬液总体积，将细胞接种到合适的培养瓶中，刚复苏时，瓶体竖向放置。

3. 细胞冻存

- 使用 $176 \times g$ ，3 min 离心收集细胞。
- 使用预冷细胞冻存液（90% FBS + 10% DMSO）重悬细胞，细胞密度调整为 5×10^6 cells/mL，每管 1 mL 分装到细胞冻存管中。
- 拧紧盖子，适当标记后，将冻存管置于梯度降温盒中，-80°C下保存至少 1 天，尽快转移至液氮中。

2. 细胞传代（以 10 cm 皿为例）

注：细胞复苏后，使用复苏培养基；待细胞状态稳定后，再更换为含有抗生素的生长培养基。

- 细胞为淋巴母细胞样细胞。
- 首次复苏后，约 48-72 h 可进行第一次传代，此次传代后细胞培养基可调整为添加抗生素的生长培养基。若 48 h 未传代，建议适当补加复苏培养基，瓶体改为横向放置。
- 当细胞密度达到 $1-1.2 \times 10^6$ cells/mL，1 传 3-1 传 4，2-3 天继续传代，不要让其密度超过 1.5×10^6 cells/mL，推荐使用 T25 瓶进行传代培养。
- 该细胞为悬浮细胞，传代时推荐使用【半换液法】对细胞状态较为有利。传代时可以直接向培养瓶中添加生长培养基，然后将细胞吹打均匀后移入新的 T25 培养瓶中继续培养。

注意事项：

- FBS 需 56°C 加热 30 分钟，可灭活补体和部分病毒，但不显著影响大多数生长因子和细胞因子活性。

五、 验证结果（示例）

1. 流式检测蛋白表达

操作步骤可调整优化，对于本实验，推荐Luciferase Raji (CD20 KO) Cell Line细胞量为 2×10^5 cells/管。操作步骤如下：

- 实验前，需等待细胞生长速率稳定，约需要3-5 d。
- 实验当天，消化 Luciferase Raji (CD20 KO) Cell Line，取100 μ L细胞悬液（细胞计数后用1% BSA/PBS调整浓度为 2×10^6 cells/mL），加入适量的表面抗体（Anti-CD20 mIgG2a Antibody (ocrelizumab)），4°C避光孵育30 min。
- 加入1-2 mL 1% BSA/PBS冲洗，400 g 离心5 min，弃上清。重复此步骤2次。
- 加入荧光标记的二抗，4°C避光孵育30 min。
- 离心弃上清，细胞用1% BSA/PBS重悬（注意避光保存）。
- 立即上机检测。
- 验证结果。

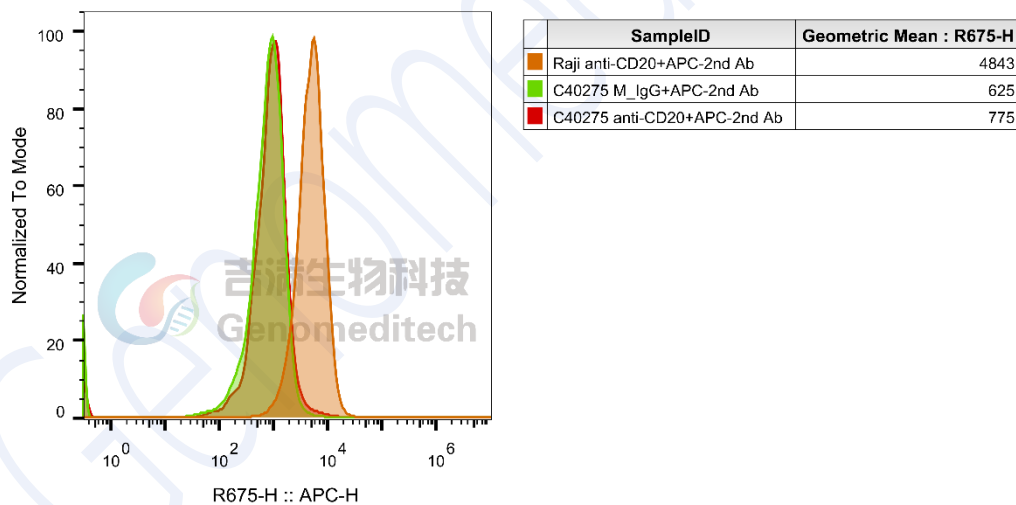


Fig 1. Luciferase Raji (CD20 KO) Cell Line (Cat. GM-C40275) was determined by flow cytometry using Anti-CD20 mIgG2a Antibody (ocrelizumab) (Cat. GM-88845AB).

2. Luciferase 检测实验

操作步骤可调整优化。本次实验使用 Luciferase Raji (CD20 KO) Cell Line 单克隆细胞作为被检测细胞，Conc.01 细胞量为 5×10^4 cells，1.5 倍梯度稀释。

1) 报告基因检测

参考报告基因检测说明书。

Luciferase Raji (CD20 KO) Cell Line	0 cells	50000 cells	1950 cells
	69	4703163	236717

2) 验证结果

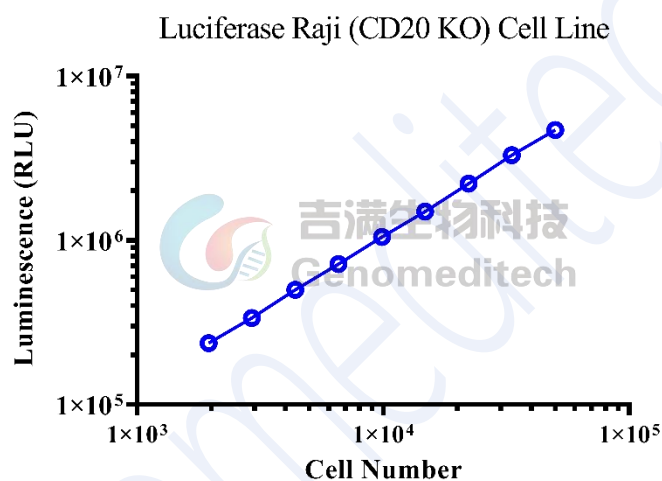


Fig 2. Correlation between the number of cells and bioluminescence values. Serial dilutions of Luciferase Raji (CD20 KO) Cell Line (Cat. GM-C40275) (96-well format). The firefly luciferase activity was measured using the GMOne-Step 2.0 Luciferase Reporter Gene Assay Kit (Cat. GM-040513).

附录 1 Sanger 测序结果

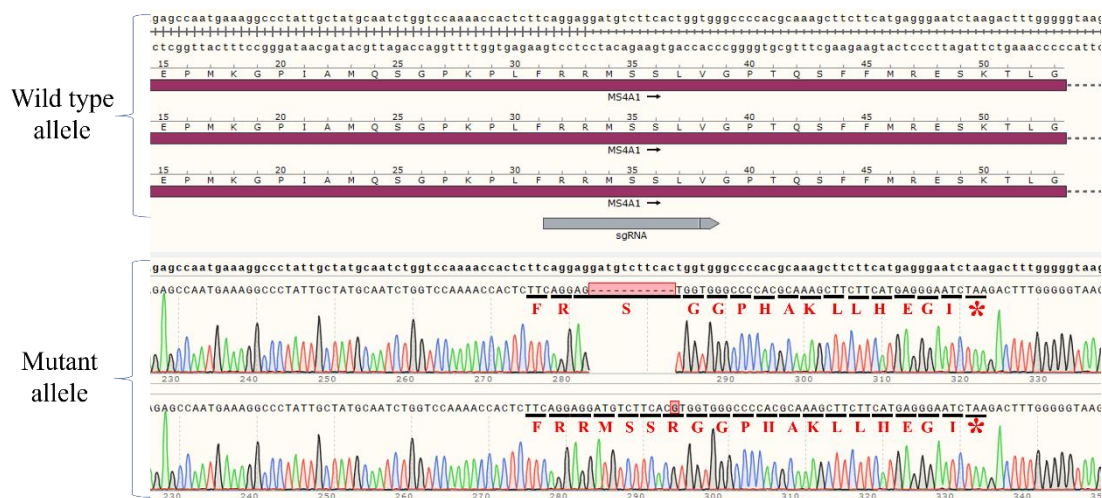


Fig 3. The Sanger sequencing of the Luciferase Raji (CD20 KO) Cell Line showed successful knockout of CD20.

相关产品:

CD20(MS4A1)	
H_CD20 KO RAMOS Cell Line	ADCC FcγRIIIa(158V) Jurkat Effector Cell Line
Cynomolgus_CD20 CHO-K1 Cell line	H_CD20 CHO-K1 Cell Line
H_CD20 HEK-293 Cell Line	Mouse_CD20 CHO-K1 Cell Line
Anti-CD20 hIgG1 Reference Antibody (Ocrebio)	Anti-CD20 hIgG1 Reference Antibody(Ritubio)
Anti-CD20 mIgG2a Antibody (ocrelizumab)	Anti-CD3×CD20 hIgG1 Bispecific Antibody (Epcobio)
Anti-H_MS4A1(CD20) hIgG1 Antibody(Ocrelizumab)	
CD19	
H_CD19 KO Raji Cell Line	Cynomolgus_CD19 CHO-K1 Cell Line
Cynomolgus_CD19 HEK-293 Cell Line	H_CD19 CHO-K1 Cell line
H_CD19 HEK-293 Cell Line	Mouse_CD19 CHO-K1 Cell Line
Anti-CD19 hIgG1 Reference Antibody (Loncbio)	Anti-CD19×CD3 hIgG1 Antibody[PIT-565(CD58 K34A)]
Anti-H_CD19 hIgG1/hIgG2 Antibody(Tafasitamab)	
CD3	
Cynomolgus_CD3D CD3E Reporter Jurkat(CD3DE KO) Cell Line	Jurkat CD3-BsAb Reporter Cell Line
Cynomolgus_CD3 HEK-293 Cell Line	Cynomolgus_CD3E(Membrane Bound ECD) CHO-K1 Cell Line
H_CD3 CHO-K1 Cell Line	H_CD3 HEK-293 Cell Line
H_CD3(TCR V2) CHO-K1 Cell Line	H_CD3(TCR V2) HEK-293 Cell Line
H_CD3(TCRαβ delta V) HEK-293 Cell Line	H_CD3D CD3E KO Jurkat Cell Line
H_CD3E KO Jurkat Cell Line	H_CD3E(Membrane Bound ECD) CHO-K1 Cell Line
Mouse_CD3 HEK-293 Cell Line	
Anti-CD19×CD3 hIgG1 Antibody[PIT-565(CD58 K34A)]	Anti-CD3 epsilon hIgG1 Antibody [OKT-3 (muromonab)]
Anti-CD3 hIgG1 Antibody(CH2527)	Anti-CD3×CD20 hIgG1 Bispecific Antibody (Epcobio)
Anti-CD3×FCRL5 hIgG1 Bispecific Antibody(cevostamab)	Anti-CD3E×BCMA hIgG4 Reference Antibody (Tecbio)
Anti-CD3E×DLL3 hIgG1 Bispecific Antibody(Tarlbio)	Anti-CD3E×MUC17 hIgG1 Bispecific Antibody(Vepsitbio)
Anti-mouse CD3ε mIgG2a Antibody(145-2C11)	

使用许可协议：

凡购买及使用本细胞系产品，即表明使用者自愿接受并遵守以下相关使用政策：

- 本细胞系产品限于科研用途，不得被利用于任何商业用途。
- 本产品严禁用于人类或动物疾病诊治，也不得直接用于人体相关实验。
- 用户及为其利益服务的第三方承包商仅可在约定科研范围内使用本材料及其子代，不得进行修饰，亦不得向任何其他实体（包括关联机构）分发、销售、转让或以其他方式提供吉满生物材料。
- 如需将本产品用于本声明范围以外的用途，须事先获得吉满生物科技（上海）有限公司的书面许可，详情请联系吉满生物科技（上海）有限公司。