

产品手册

H_CDH17 CT26 Cell Line

H_CDH17 CT26 细胞系

For research use only!

本品仅供科研使用，严禁用于治疗！

版本号：V2.12.3

目录

| | | |
|---------|--------------------------------------|---|
| 一、 | 产品基本信息及组分 | 3 |
| 二、 | 包装、运输及储存 | 3 |
| 三、 | 材料准备 | 3 |
| 1. | 细胞培养、冻存、复苏试剂准备 | 3 |
| 2. | 试剂耗材准备 | 3 |
| 四、 | 细胞复苏、传代、冻存 | 4 |
| 1. | 细胞复苏 | 4 |
| 2. | 细胞传代 | 4 |
| 3. | 细胞冻存 | 4 |
| 五、 | 验证结果 | 5 |
| 1. | 流式检测蛋白表达 | 5 |
| 附录 1 | 成瘤数据 | 6 |
| 附录 2 | H_CDH17 氨基酸序列 (Q12864-1; ΔICD) | 7 |
| 附录 3 | 稳定性验证 | 7 |
| 使用许可协议: | | 8 |

一、产品基本信息及组分

基本信息

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 |
|-----------|------------------------|--------------------|
| GM-C30064 | H_CDH17 CT26 Cell Line | 1 管 (5E6 Cells/mL) |

组成成分

| 产品编号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 储存 |
|-----------|------------------------|--------------|-----|--------|
| GM-C30064 | H_CDH17 CT26 Cell Line | 5E6 Cells/mL | 1 管 | -196°C |

二、包装、运输及储存

1. 细胞系产品干冰运输，-196°C 以下（冰箱或液氮的气相）长期储存。
2. 接触产品请带手套。请收到产品立即确认产品是否为冻存状态，-196°C 以下（冰箱或液氮的气相）长期储存。
3. 本产品相关实验，应在二级生物安全实验室或生物安全柜中进行。

三、材料准备

1. 细胞培养、冻存、复苏试剂准备

| | |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| 细胞复苏培养基: | RPMI 1640+10% FBS+1% P.S |
| 细胞生长培养基: | RPMI 1640+10% FBS+1% P.S+4 µg/mL Blasticidin+4 µg/mL Puromycin |
| 细胞冻存液: | 90% FBS+10% DMSO |

2. 试剂耗材准备

试剂准备

| Reagent | Specification | Manufacturer/Catalogue No. |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Puromycin | 25 mg | Genomeditech/GM-040401-1 |
| Blasticidin | 10 mg | Genomeditech/ GM-040404-1 |
| Pen/Strep | 100 mL | Thermo/15140-122 |
| Fetal Bovine Serum | 500 mL | ExCell/FSP500 |
| RPMI 1640 | 500 mL | Viva Cell BIOSCIENCES/ C3010-0500 |
| Anti-CDH17 hIgG1 Antibody(BI-905711) | / | Genomeditech/GM-52672AB |

重要仪器

| Equipment | Manufacturer/Catalogue No. |
|-----------|------------------------------------|
| 细胞计数仪 | ThermoFisher Scientific/Countess 3 |
| 流式细胞仪 | 贝克曼库尔特国际贸易（上海）有限公司/CytoFLEX |

四、 细胞复苏、传代、冻存

1. 细胞复苏

- 37°C水浴锅预热培养基，加入预热后的完全培养基 5 mL 至 15 mL 离心管。
- 从液氮中取出冻存细胞并迅速放入 37°C恒温水浴锅，将细胞液面浸至水面以下不断摇动至融化。
- 用 75%乙醇擦拭冻存管外部以降低污染的几率。在生物安全柜或超净台中将冻存管中的细胞悬液转移到步骤 a) 的离心管中，轻轻混匀， $176 \times g$ ，离心 3 min，使细胞沉淀，弃上清。
- 使用 1 mL 复苏培养基重悬，可取出部分使用台盼蓝染色计数活细胞，活细胞 $\geq 3 \times 10^6$ cells/mL。
- 通过补加完全培养基的形式，调整活细胞密度到 $2-3 \times 10^5$ cells/mL，根据细胞悬液总体积，将细胞接种到合适的培养皿中。

3. 细胞冻存

- 使用 $176 \times g$ ，3 min 离心收集细胞。
- 使用预冷细胞冻存液（90% FBS + 10% DMSO）重悬细胞，细胞密度调整为 5×10^6 cells/mL，每管 1 mL 分装到细胞冻存管中。
- 拧紧盖子，适当标记后，将冻存管置于梯度降温盒中，-80°C下保存至少 1 天，尽快转移至液氮中。

2. 细胞传代

注：细胞复苏后的 1 至 2 代，使用复苏培养基，待细胞状态稳定后开始细胞维持和繁殖，再更换为含有抗生素的生长培养基。

- 细胞为上皮细胞，贴壁生长。培养箱中孵育 16-24 h 后，镜下观察细胞贴壁情况。当细胞密度大于 60%时，即直接进行传代。如未完全贴壁，继续孵育至 48 h。推荐细胞传代比例为 1:3-1:5，2-3 天传代。
- 将皿或培养瓶中的培养基弃去，10 cm 皿加 2 mL PBS 润洗 1 次。
- 弃 PBS，加 1 mL 0.25% Trypsin-EDTA 消化液，37°C 消化 30-60 s，显微镜下观察。
- 待细胞变圆，细胞间隙明显，部分细胞刚开始脱离瓶壁时，加 2 mL 左右培养基混匀终止消化，将细胞小心吹打下来， $176 \times g$ 室温离心 3 min。
- 弃上清，细胞沉淀用培养基重悬，根据传代前细胞密度分盘（根据培养皿面积和细胞密度计算，传代后细胞密度为 20-30%）。

注意事项：

细胞状态稳定后，传代后死细胞会变少，细胞增长速度趋于稳定，细胞形态均匀，胞体健壮。

五、 验证结果

1. 流式检测蛋白表达

操作步骤可调整优化，对于本实验，推荐H_CDH17 CT26 Cell Line细胞量为 2×10^5 cells/管。操作步骤如下：

- 实验前，需等待细胞生长速率稳定，约需要3-5 d。
- 实验当天，消化H_CDH17 CT26 cell line，取100 μ L细胞悬液（细胞计数后用PBS调整浓度为 2×10^6 cells/mL），加入适量的表面抗体（Anti-CDH17 hIgG1 Antibody），4°C避光孵育1 h。
- 加入1-2 mL PBS冲洗，重复此步骤。
- 加入荧光标记的二抗，4°C避光孵育30 min。
- 1000 rpm离心5 min，去除上清，用300 μ L PBS重悬。
- 立即上机检测。
- 验证结果。

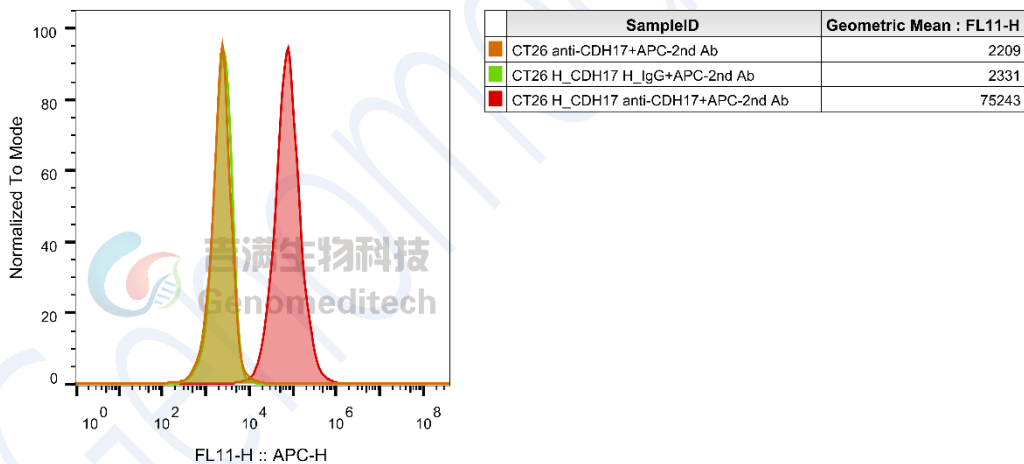


Fig1. 流式验证结果

附录 1 成瘤数据

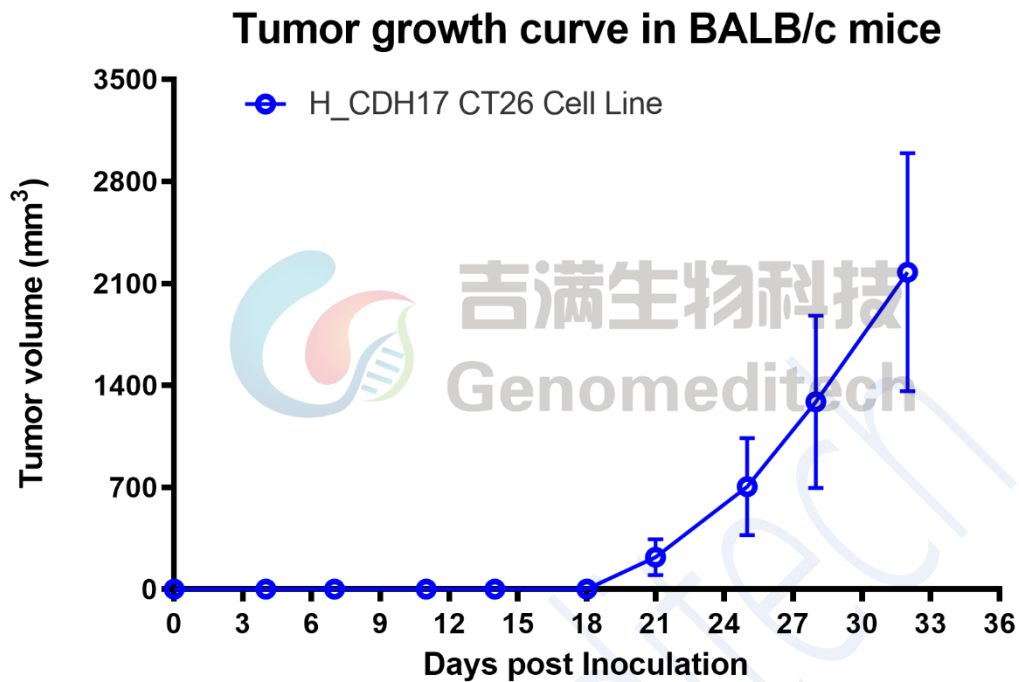


Fig 2. 在 BALB/c 小鼠中 H_CDH17 CT26 Cell Line 的肿瘤生长曲线。将 H_CDH17 CT26 Cell Line (1×10^6 个细胞/只) 分别皮下接种于 BALB/c 小鼠 (雌性, 6-8 周龄, $n=3$)。每周测量一次肿瘤体积, 数据以平均值 \pm SEM 表示。

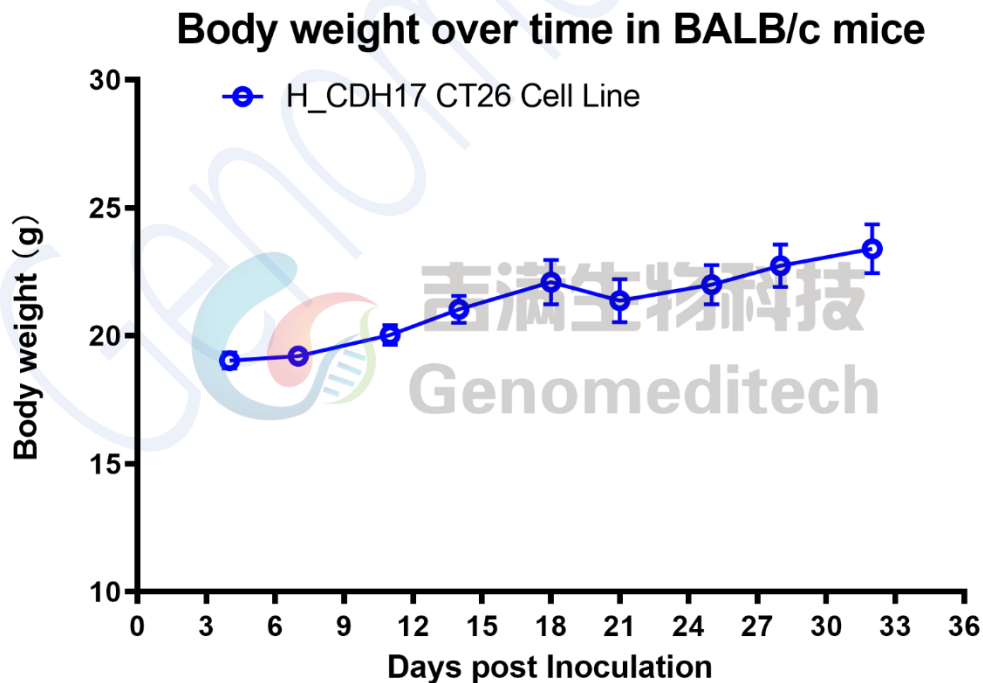


Fig 3. 在 BALB/c 小鼠 H_CDH17 CT26 Cell Line 移植后的体重变化。相同实验条件下, 每周测量一次体重, 数据以平均值 \pm SEM 表示。

附录 2 H_CDH17 氨基酸序列 (Q12864-1; ΔICD)

MILQAHLHSLCLLMYLATGYGQEGKFSGPLKPMTFISIYEGQEPSQIIFQFKANPPAVTFEL
TGETDNIFVIEREGLLYYNRALDRETRSTHNLQVAALDANGIIVEGPVPITIKVKDINDNRP
TFLQSKYEGSVRQNSRPGKPFLYVNATDLDDPATPNGQLYYQIVIQLPMINNVMYFQINN
KTGAISLTREGSQELNPAKNPSYNLVISVKDMGGQSENSFSDDTTSVDIIVTENIWKAPKPVE
MVENSTDPHIKITQVRWNDPGAQYSLVDKEKLPRFPFSIDQEGDIYVTQPLDREEKDAY
VFYAVAKDEY GKPLSYPLEIHVKVKDINDNPPTCSPVTVFEVQENERLGN SIGTLTAHDR
DEENTANSFLNYRIVEQTPKLPMDGLFIQTYAGMLQLAKQSLKKQDTPQYNLTIEVSDK
DFKTLCFVQINVIDINDQIPIFEKSDYGNLTLAEDTNIGSTILTIQATDADEPFTGSSKILYHII
KGDSEGR LGVDDPHTNTGYVIIKKPLDFETA AVSNIVFKAENPEPLVFGVKYNASSFAKF
TLIVTDVNEAPQFSQHVFQAKVSEDVAIGTKVGNVTAKDPEGLDISYSLRGDTRGWLKID
HVTGEIFSVAPLDREAGSPYRVQV VATEVGGSSLSSVSEFHLILMDVNDNPPRLAKDYTG
LFFCHPLSAPGSLIFEATDDDQHLFRGPHFTFSLGSGSLQNDWEVSKINGTHARLSTRHTEF
EEREYVVLIRINDGGRPPLEGIVSLPVTF CSCVEGSCFRPAGHQGTGPTVGM AVGILLTLL
VIGIILAVVFI

附录 3 稳定性验证

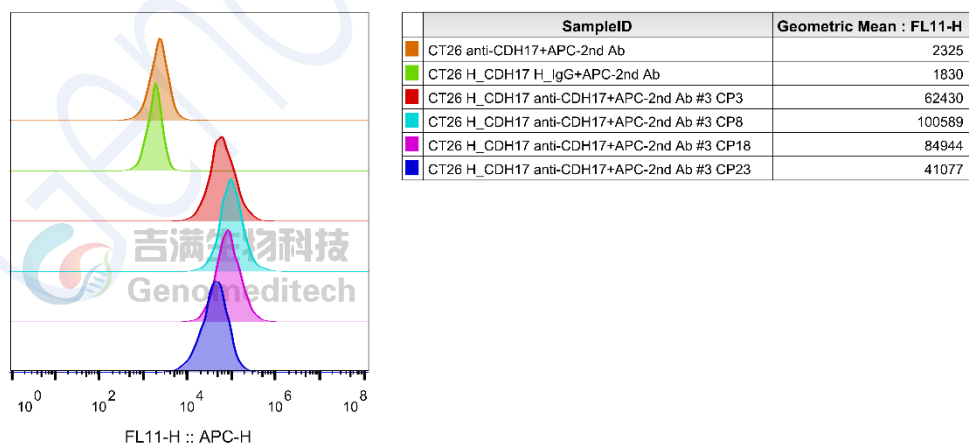


Fig4. #3 稳定性验证

使用许可协议：

凡购买及使用本细胞系产品，即表明使用者自愿接受并遵守以下相关使用政策：

- 本细胞系产品限于科研用途，不得被利用于任何商业用途。
- 本产品严禁用于人类或动物疾病诊治，也不得直接用于人体相关实验。
- 用户及为其利益服务的第三方承包商仅可在约定科研范围内使用本材料及其子代，不得进行修饰，亦不得向任何其他实体（包括关联机构）分发、销售、转让或以其他方式提供吉满生物材料。
- 如需将本产品用于本声明范围以外的用途，须事先获得吉满生物科技（上海）有限公司的书面许可，详情请联系吉满生物科技（上海）有限公司。